

EP-TRACER® 2 ProCart

Sistema de medición electrofisiológica con estimulador totalmente integrado


**schwarzer
cardiotek**
SMART. PRECISE. RELIABLE.



EP-TRACER 2* con estimulador totalmente integrado es apto tanto para estudios clínicos como estudios electrofisiológicos experimentales. EP-TRACER 2 ProCart constituye una plataforma ideal para realizar procedimientos electrofisiológicos en laboratorios electrofisiológicos o híbridos.

Gracias a su diseño compacto, ProCart se puede trasladar rápidamente de un laboratorio a otro cuando haga falta. El sistema se compone de un sistema electrofisiológico completamente funcional que incluye dos monitores de alta resolución, uno para mostrar señales en tiempo real y el otro para realizar la revisión y el análisis.

* EP-TRACER con la versión de software 2

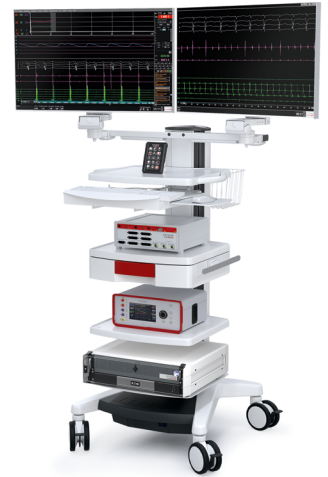

Características de EP-TRACER 2 ProCart

Amplificador

Los amplificadores EP-TRACER 2 ofrecen la posibilidad de conectar 20, 52 u 84 canales intracardíacos. Todos los modelos de amplificador permiten conectar 12 canales de ECG de superficie y 6 canales auxiliares aptos para, por ejemplo, medición invasiva de presión arterial.

Estimulador integrado

EP-TRACER 2 está equipado con un estimulador integrado de 2 canales. El software permite estimular cualquier canal intracardíaco con un solo clic de ratón, sin necesidad de cableado o equipamiento externo adicional. La personalización y el acceso a los protocolos de estimulación se realizan con sencillez, agilizando de este modo los procedimientos.

Software

El software de EP-TRACER 2 presenta una interfaz intuitiva que responde a todas las necesidades en cada fase del procedimiento. Modos especiales de barrido como el modo accionado (Trigger), el modo de presión y los modos múltiples configurables en pantalla partida constituyen el entorno perfecto para la visualización de datos procedentes de distintas fuentes. Por ejemplo, es posible mostrar


en un diseño personalizado las señales de ECG de superficie o intracardíacas, presión arterial invasiva y los datos de ablación (apto para abladores de RF y de crioterapia).

Los mandos de un solo toque para iniciar/detener la estimulación, disminuir el tiempo de intervalo, cargar protocolos de estimulación guardados, guardar eventos y agregar comentarios, etc. permiten operar EP-TRACER sin interrupciones dentro del flujo de trabajo preferido por el usuario.

Todos los eventos tienen registro de fecha y hora y se añaden al historial de eventos del procedimiento personalizable para facilitar la elaboración de informes y la revisión desde cualquier lugar de la red del hospital por medio de nuestro software especializado para ello.

Características adicionales

- Nueva herramienta para la exportación de valores de las señales calibrados (en mV)
- Generación de informes con un solo clic. Plantillas personalizables para una flexibilidad total
- Presentación integral de anotaciones y mediciones dentro de una grabación
- Detección automatizada de generadores conectados (RF- y criobladores)
- El EP-TRACER se puede combinar con los equipos de PFA más habituales del mercado
- Operación por iconos: función de marcador rápido, captura de pantalla y texto automático para agilizar la inserción de anotaciones y la generación de informes
- Medición de la presión arterial invasiva (IBP) para determinar mejor la posición del catéter durante la punción transseptal.
- Nuevo filtro especial para la supresión de ruido al analizar señales de EP
- Actualización del sistema de estimulación del sistema de conducción (CSP): visualización de la corriente de lesión (COI) y medición del tiempo definida por el usuario (LVAT)

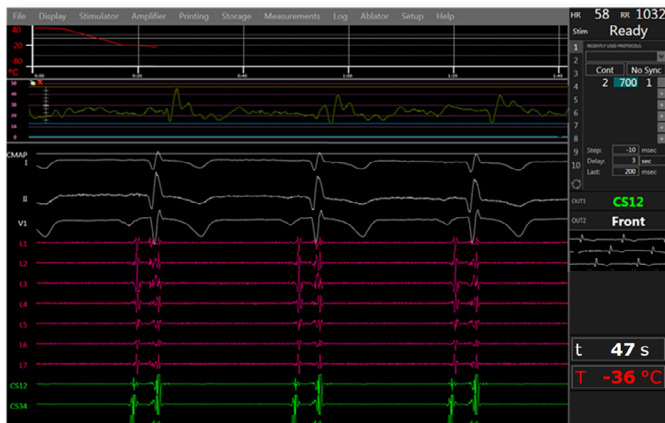

EP-TRACER® 2 ProCart

Sistema de medición electrofisiológica con estimulador totalmente integrado



Componentes

- ProCart
 - Transformador de aislamiento, aprox. 1.600 VA
 - Sistema de ordenador personal (Windows 10, 64 bits)
 - Monitores 2 x 24"
 - Smart Keyboard
- Software EP-TRACER 2
 - Software de grabación
 - Manual de instrucciones
 - Software de revisión
 - Licencia en llave USB
- Amplificador electrofisiológico
 - 20, 52 u 84 canales intracardiacos
 - 12 canales de ECG de superficie
 - 6 canales auxiliares, p. ej. para la medición invasiva de la presión arterial
 - Estimulador integrado con 2 salidas
 - Permite aplicación personalizada de estimulación vía canales intracardiacos sin cableado externo
 - Modo entrada: bipolar o unipolar
 - Alimentación eléctrica aislada
 - Cajas de conexión de catéteres
 - Power-box (cuadro de alimentación), 100-240 V
 - Juego de filtros con EP-TRACER 2 70 y 102
- Cables
 - Cable para caja de conexión de catéter (aprox. 3m)
 - Cable ECG con electrodos
 - Cable de fibra de carbono RTBG-3605, L = 90cm

Detalles técnicos

Dispositivo heredado del Reglamento MDR (Conforme a la Directiva MDD 93/42/CEE)		Clase IIb
EP-TRACER 2		
Canales intracardiacos	20/52/84	
Velocidad de muestreo	1 kHz por canal	
Caja de conexión de catéter	CCB4/CCB5/CCB6/CCB8 (Opción CSP)	
	Modo entrada: bipolar y unipolar	
Canales de ECG	Conexiones de electrodos: R, L, F, N, C1-C6 Derivaciones I, II, III, aVL, aVR, aVF C1-C6 Calibración equivalente a 1 mV	
Canales adicionales	6 canales AUX Conexiones: 3 x 9 pin REDEL (2 canales por conexión) Modo de entrada: bipolar	
Fuga de corriente	< 50 µA	
Modo de estimulación de apoyo	60 latidos por minuto en Out1-Out2 simultáneamente corriente = 8 mA (Out1) corriente = 4 mA (Out2) amplitud pulso = 2 ms	
Estimulador	Corriente 0 - 25,5 mA (personalizable) Incremento mínimo 0,5 mA	
Convertor analógico/digital	Resolución: 12 bits Peso de bit: 1,25 µV/ LSB Fréquence d'échantillonnage: 1000 échantillons/s par canal	
Sistema operativo		Windows 10, 64 bits
Monitores PC	2 x 24" alta resolución 4 sorties vidéo	
Estándares de aplicación	EN 60601-1 EN 60601-1-2 EN 60601-1-6 EN 60601-2-27 EN 60601-2-34 EN 62366 EN 62304	
Seguridad del paciente	Clase de protección I, tipo CF según la norma IEC 60601-1; conectores del paciente protegidos contra los efectos de los impulsos de desfibrilación	
Dimensiones (al. x an. x f)	ProCart (incl. monitores) EP-TRACER 2 38/70/102	1650 x 850 x 650 mm 60 x 280 x 270 mm / 110 x 290 x 260 mm / 110 x 290 x 260 mm
Peso	ProCart EP-TRACER 2 38/70/102 Monitor	aprox. 100 kg en función de la configuración aprox. 2,2 kg / 3,3 kg / 3,8 kg aprox. 10,6 kg
Etiquetado solo para dispositivo médico EP-TRACER 2		CE 0197

Nota: La versión EP-TRACER ProCart se vende como un paquete de sistema, mientras que el dispositivo principal, EP-TRACER, es un dispositivo médico con marcado CE de clase IIb. El contenido puede estar sujeto a cambios. * Sólo para EP-TRACER 2 38